

POINT DE VUE LUNETTES NUMÉRIQUES



MANUEL DE L'UTILISATEUR

Version 1.0

PARTIES INCLUSES

Casque d'écoute

Adaptateur secteur

Recharger le câble

Manuel du propriétaire

Oreillettes

Cas de figure

INTRODUCTION

Félicitations pour votre achat du ViewPoint. Nous avons créé ce produit remarquable en combinant des matériaux de pointe de haute qualité avec notre logiciel développé sur mesure pour produire une expérience visuelle et sensorielle sans précédent et inégalée. Pesant un peu plus d'une livre, votre ViewPoint est léger et peut être porté confortablement pendant de longues périodes. Nous immergeons votre vision, éliminons l'éblouissement externe et renforçons votre champ de vision périphérique.

Nous ne nous sommes pas arrêtés là. Nous avons placé la barre encore plus haut, en vous offrant l'avantage d'entendre la lecture à haute voix des documents imprimés. Cela réduit la fatigue visuelle et permet une compréhension plus rapide. Vous pouvez utiliser votre ViewPoint pour regarder la télévision, le théâtre, les événements sportifs, les musées, les croisières, les safaris, votre famille, travailler sur des projets artistiques, des tâches à distance, des menus, des panneaux, des écrans d'ordinateur, des tablettes, des

**téléphones intelligents, et bien plus encore.
Imaginez les possibilités !**

2

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ

Nous avons conçu le ViewPoint pour qu'il puisse être porté en étant assis ou debout, immobile et sans bouger.

Pour éviter de trébucher ou de tomber accidentellement, il est

Il est impératif de ne pas bouger lorsque vous portez le casque car il englobe l'ensemble de votre champ visuel. N'essayez pas de marcher en portant l'oreillette ViewPoint.

NE PAS UTILISER COMME

UN APPAREIL DE

MOBILITÉ NE PAS

BOUGER, MARCHER OU

SE METTRE EN
MOUVEMENT

NE PAS TENTER DE
CONDUIRE QUOI QUE
CE SOIT.

EN UTILISANT LE POINT DE VUE

Avant d'allumer l'appareil, veuillez prendre un moment pour placer le ViewPoint sur votre tête, au-dessus de vos yeux, tirer sur les sangles élastiques et les ajuster à l'aide des velcros, en vous assurant qu'il est confortablement ajusté sur votre visage et bien équilibré sur le dessus de votre tête et sur les côtés. Note : Si vous portez des lunettes correctrices, veuillez les garder et porter le ViewPoint SUR vos lunettes correctrices. Dans le cas peu probable où vos lunettes seraient trop grandes pour s'intégrer dans le système, nous vous recommandons des lunettes correctrices plus petites, adaptées à l'unité.

Lors de la mise en marche de votre unité, il arrivera sur un AVERTISSEMENT message (photo ci-dessous), il est impératif pour votre sécurité et la sécurité des autres que vous utilisez uniquement cet appareil en position assise ou debout encore. Ne pas marcher, conduire ou se déplacer de quelque manière que ce soit
Peu importe.

Pendant la visualisation de cet AVERTISSEMENT message, atteindre au-dessus de la visière et localisation de la pupille roue de distance, l'ajuster à obtenir la meilleure clarté en regardant le image d'écran. Note : L'unité ne nécessitent pas de réajustement si vous êtes le seul utilisateur.

WARNING

The Patriot® ViewPoint
is not intended for driving or mobility.

Press any button to continue



4

GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE



LIRE - APPUYER POUR FAIRE LIRE L'IMPRIMÉ À HAUTE VOIX
COULEURS - APPUYEZ SUR POUR CHANGER LES CHOIX DE COULEURS
ZOOM AUGMENTER LE GROSSISSEMENT - GLISSER VERS L'AVANT
ZOOM DIMINUER LE GROSSISSEMENT - FAIRE GLISSER VERS L'ARRIÈRE
PLUS LUMINEUX - BALAYEZ
PLUS SOMBRE - GLISSER VERS LE BAS

La photo de droite montre l'emplacement du port de chargement rapide USB-C. Celui-ci peut être branché sur l'adaptateur secteur de l'unité de charge - la prise peut être insérée dans les deux sens.



Tous les contrôles nécessaires sont situés sur le côté droit du ViewPoint.

Il existe un TRACKPAD qui



consiste en une surface lisse avec une fossette en son centre. Touchez doucement la fossette et c'est la "position d'origine". En **MODE LIVE**, vous pouvez faire glisser le curseur vers l'avant pour augmenter le zoom, vers l'arrière pour le diminuer. Faites glisser vers le haut pour augmenter la luminosité et vers le bas pour la diminuer.

Vous pouvez également appuyer sur le bouton **COULEURS** pour passer d'une combinaison de




couleurs contrastantes à l'autre comme suit : **Original (couleur)**, **Contraste élevé (couleur)**, **Noir sur blanc**, **Blanc sur noir**, **Noir sur jaune**, **Jaune sur noir**, **Noir sur vert**, **Vert sur noir**, **Jaune sur bleu**, **Bleu sur jaune**, **Niveaux de gris**

Note : Vous pouvez personnaliser et réduire le nombre d'options de sélection de couleurs. Pour ce faire, allez à votre option "couleur non vraie" préférée et maintenez le bouton du mode couleur enfoncé pendant 7 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un carillon.

Cela limitera vos options à quatre au total, comme suit : 1) Original (couleur) 2) Contraste élevé (couleur) 3) Le favori que vous avez choisi 4) L'inverse de ce favori

CONTRÔLE DES CASQUES - SUITE

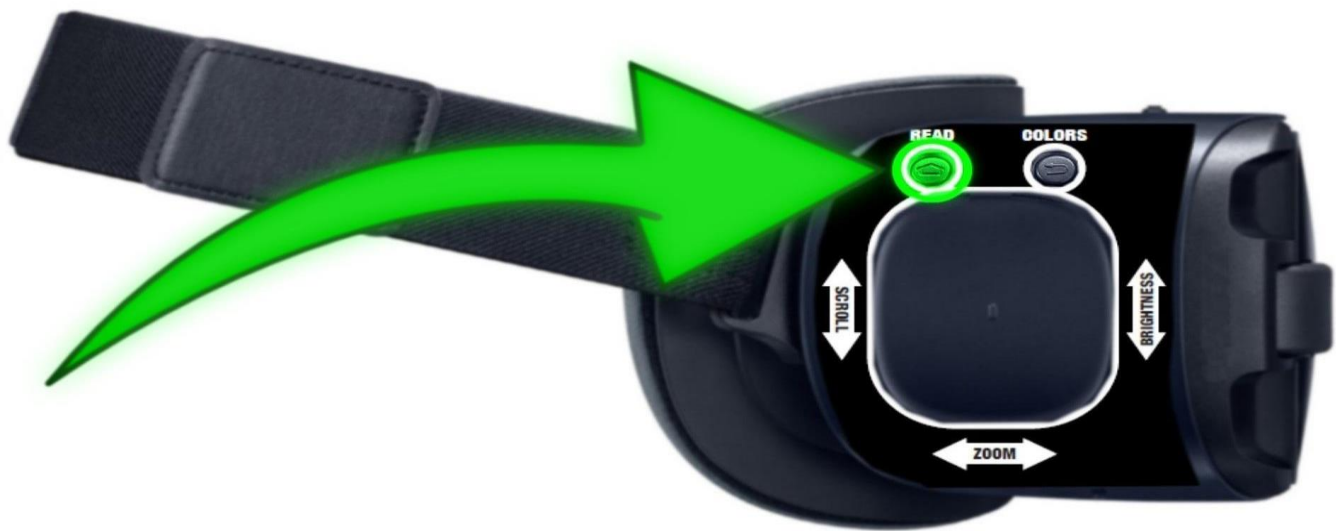

Pour lire un texte imprimé à haute voix, visez le texte et appuyez sur le bouton LIRE pour prendre une photo du matériel imprimé, ce qui fait entrer l'unité en MODE LIRE. L'unité commence à lire à haute voix et présente le texte à l'écran. En


MODE LECTURE, le fait de glisser vers le haut permet de lire la phrase précédente, le fait de glisser vers le bas permet de lire la phrase suivante, le fait de glisser vers l'arrière permet de réduire le zoom et le fait de glisser vers l'avant permet d'augmenter le zoom. Un double appui au centre du trackpad mettra la lecture en PAUSE et un nouvel appui permettra de RESUME la lecture. En appuyant à nouveau sur le bouton LIRE, vous quittez le MODE LIRE et vous revenez au MODE VIVANT.

MENU DES PARAMÈTRES AVANCÉS


Avancé

Le menu des paramètres est accessible en appuyant sur le bouton READ pendant 15 secondes jusqu'à ce qu'un carillon retentisse et que le

L'écran MENU PRINCIPAL apparaît, illustré ici

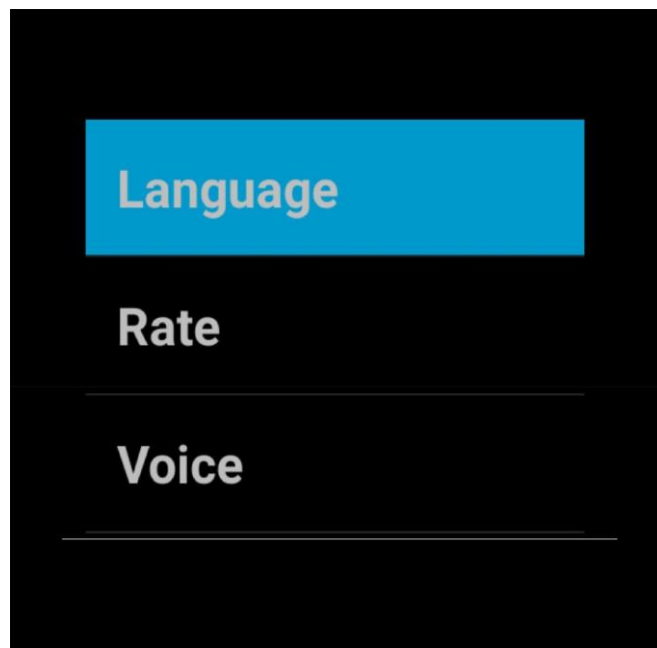

Faites glisser le curseur vers le haut ou vers le bas sur le TRACKPAD pour choisir l'option souhaitée, puis sélectionnez l'option souhaitée en appuyant sur le bouton LIRE.

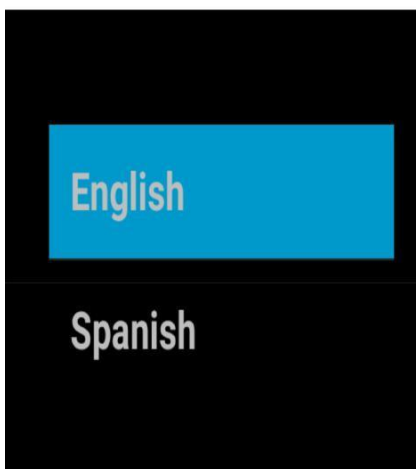

Sous-menu LANGUE

Sous-menu RATE

Sous-menu VOICE

NOTE : POUR REVENIR À UN MENU PRÉCÉDENT EN APPUYANT SUR LE BOUTON DES COULEURS. SI VOUS APPUYEZ PLUSIEURS FOIS SUR LE BOUTON DES COULEURS, VOUS QUITTEREZ COMPLÈTEMENT LE MENU.

LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- **Taille : 7,95" x 4,58" x 3,65".**
- **Champ de vision de 96 degrés (le plus large au monde)**
- **2960 x 1440 pixels Super AMOLED**
- **Pixels par pouce (PPI) 570**
- **Poids : 1,2 livre**
- **Appareil photo de 12 mégapixels (f/1,7, 26 mm, 1/2,5", 1,4 µm, PDAF à double pixel), autofocus à détection de phase, OIS,**

- **Vidéo 4K, détection des visages et des sourires, Auto HDR, panorama, Flash Dual LED**
- **Batterie 3000 mAh, Lithium Ion**
- **Processeur Octa-Core de 1,9 gig**
- **Android 7.0**
- **Compas/ Magnétomètre**
- **Capteur de proximité**
- **Accéléromètre**
- **Capteur de lumière ambiante**
- **Gyroscope**
- **Couverture de la distance interpupillaire 54-70mm**
- **Roue d'ajustement de la mise au point**
- **Sangles transversales ajustables**
- **Logiciel propriétaire personnalisé pour le contrôle des fonctionnalités d'alimentation pour le guidage et logiciel de gestion opérationnelle des batteries**
- **Durée de fonctionnement de la batterie : 6 heures**
- **Garantie d'un an**

CONTACTEZ-NOUS

**Vous pouvez contacter votre revendeur agréé ou nous
contacter à l'adresse suivante**

TrySight Inc.

1-866-499-2921

Courriel : sales@trysight.com

